


**Le Profiller™ *electro* 447**

**Ce pipeteur offre à tout utilisateur une prise en main très confortable. Son ergonomie rend idéal l'usage de pipettes en verre ou en plastique, pour travailler sous hotte à flux laminaire ou enceinte stérile. Moteur puissant et silencieux pour un pipetage efficace, même sur de grands volumes. Différentes options de réglage. Un an de garantie.**

- Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes
- Sélecteurs ergonomiques
- Large affichage, visible en tout temps
- Témoin de charge en temps réel
- Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation
- Construction résistante aux chocs et aux agressions chimiques
- Filtre de protection avec membrane en PTFE interchangeable
- Support utilisable sur le mur ou la paillasse



Pipettes jusqu'à 100 ml et au-delà

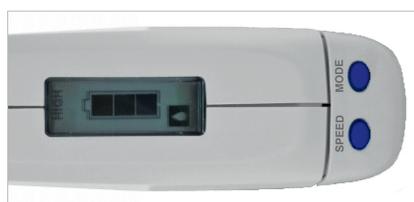

**Choix du mode de distribution**

Activation instantanée de la distribution avec blow-out (TC) ou par gravité (TD).

**Réglage rapide de la vitesse**

Commutateur pour le choix de l'intensité de la vitesse d'aspiration et de distribution, indication claire sur l'affichage.

**Commande**

Profiller™ <i>electro</i> 447	Emballage	No. cat.
Avec prise et alimentation	1 / pk	447.100

Description	Emballage	No. cat.
Filtre à membrane, 0,45 µm	5 / pk	322.447
Filtre à membrane, 0,2 µm	5 / pk	322.407
Porte-pipette en silicone	1 / pk	1.447.01
Cône de recharge	1 / pk	1.447.02



**Activation confortable**

Aspiration et distribution avec un minimum d'effort, grâce à deux sélecteurs ergonomiques. Ils permettent de réguler la vitesse.



**Recharge de la batterie**

Le branchement direct sur l'instrument permet la recharge de la batterie pendant le travail ou sur son support. Niveau de charge visible sur l'affichage.

**Supports pratiques**

L'instrument est livré avec un support de paillasse stable grâce à 3 ventouses et un support mural adhésif.

**Contenu**

Livré avec alimentation et cordon, 4 types de prise (EU, US/JP, GB, AUS/NZ), deux filtres hydrophobes (0.45 µm et 0.2 µm), support de table, support mural et mode d'emploi.

Description	Emballage	No. cat.
Support de table	1 / pk	320.947
Support mural	1 / pk	320.447
Batterie NiMH de recharge, 1.2V	3 / pk	900.917