



## Buste per sterilizzazione Qualitix®

Adatte a qualsiasi dispositivo medico, veterinario o di laboratorio, avente dimensione da piccola a media, le buste monouso Qualitix® garantiscono un avvolgimento facile ed efficace, di utensili che hanno bisogno di essere sterilizzati. Realizzate in carta medica robusta (*medical grade paper*), le buste si chiudono saldamente con una striscia autosigillante per mantenere la sterilità. Il contenuto rimane sempre visibile attraverso la pellicola laminata trasparente in PET / CPP.



- Materiale robusto e durevole
- Identificazione rapida del contenuto
- Larga striscia autosigillante, semplice da chiudere
- Sigillo superiore a punta per un'apertura facilitata
- Idonee per sterilizzazione a vapore e con ossido di etilene
- Due indicatori della sterilizzazione
- Cinque differenti misure
- Conformità alle direttive ISO 17665, ISO 11135, MDR 2017/745

## Campionature omaggio su richiesta

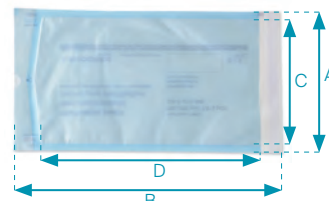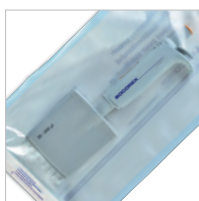

### Indicatori della sterilizzazione

Due indicatori chimici sono inclusi per confermare la congruità del processo di sterilizzazione. L'indicatore blu vira in grigio scuro dopo il passaggio in autoclave, mentre l'indicatore rosso muta in giallo dopo la sterilizzazione con ossido di etilene.

### Autosigillatura - apertura rapida

Semplicemente rimuovere la striscia di protezione, piegare e premere con le dita. La busta rimane sigillata saldamente per mantenere la sterilità del prodotto.

### Dimensioni

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
83	160	65	110
90	260	70	205
135	260	115	205
190	360	170	300
300	395	270	335

### Controllo dell'integrità

La pellicola laminata azzurrata consente di controllare facilmente l'integrità della pellicola e della busta. Non utilizzare buste danneggiate.

### Informazioni per gli ordini

Descrizione	Dimensioni		Materiale	Imballo	Codice
Busta, autosigillante	83 x 160 mm	3.3" x 6.3"	Carta <i>med. grade</i> /PET/ CPP	200 / conf.	3210.0816
Busta, autosigillante	90 x 260 mm	3.5" x 10.2"	Carta <i>med. grade</i> /PET/ CPP	200 / conf.	3210.0926
Busta, autosigillante	135 x 260 mm	5.3" x 10.2"	Carta <i>med. grade</i> /PET/ CPP	200 / conf.	3210.1326
Busta, autosigillante	190 x 360 mm	7.5" x 14.2"	Carta <i>med. grade</i> /PET/ CPP	200 / conf.	3210.1936
Busta, autosigillante	300 x 395 mm	11.8" x 15.6"	Carta <i>med. grade</i> /PET/ CPP	200 / conf.	3210.3040



Vedere il video